


MANUAL DEL USUARIO

PROGRAMA: **SINTOMAT**

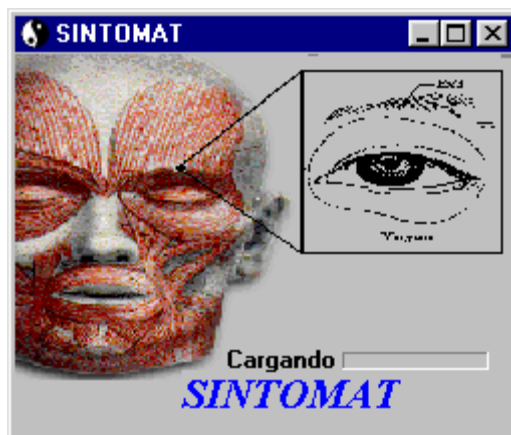

El programa SINTOMAT se ha concebido como una ayuda para el Médico o Técnico que trabaja con los puntos de Acupuntura en actividades de la Salud.

Aparecen 612 recetas que pueden ser usadas para el servicio o la investigación. En estos puntos de Acupuntura pueden aplicarse diferentes tratamientos, en

dependencia de la existencia de la fuente de energía que maneje el especialista, pueden ser agujas, electrodos estimuladores, láser, cromoterapia, dígito puntura, láminas u otros medios energéticos.

La información que contiene procede de libros de autores muy reconocidos como puede verse en la Bibliografía, los cuales fueron seleccionados por su amplia divulgación y fortaleza en este campo. Es cierto que los acupunturistas muy experimentados usan sus propias recetas pero siempre pueden consultar a buenos maestros para aplicar con alta seguridad los tratamientos. Los médicos menos hábiles en MNT tendrán una gran ayuda y ha de servirles para tomar destreza y mejorar la atención a sus pacientes

Pantalla # 2: Selección de los síntomas o patologías.

Estas son las 9 secciones o grupos de síntomas y patologías que tiene implementado el software. La selección de una de ellas provoca que las demás se deshabiliten.

Aquí es donde se muestra el resultado de los puntos a tratar de acuerdo al síntoma o patología seleccionada.

Procesar: Para obtener los puntos a

Deshacer: Lleva todo a la posición inicial.

Finalizar: Cierra el programa

Avanzado: Pasa a la segunda pantalla, proporcionando un informe más detallado de los puntos a tratar y desde donde se podrá acceder a la pantalla de localización y visualización de puntos.

El programa SINTOMAT está dividido en 9 secciones para su mejor manejo, las mismas coinciden con los sistemas en que habitualmente la Medicina occidental reconoce patologías por Especialidades.

Dentro de cada una de las 9 se ha organizado alfabéticamente las palabras que como síntomas o patologías aparecen referidos en la literatura técnica consultada.

Inicialmente se selecciona en la saeta a la derecha la sección de interés, se abre y se escoge la patología o síntomas y se marca en ejecutar y aparece el nombre de los puntos relacionados.

En caso de que no recuerde la localización de los puntos que se recomiendan según lo que desea tratar, debe marcar AVANZADO, donde aparece una ventana para poner el punto que desea ver, esta nueva ventana es la de RESULTADOS.

Pantalla # 3: Resultados.

Para salvar los resultados en una hoja clínica que debe llenarse por el médico

Para abrir la pantalla de localización de puntos.

Para abrir un reporte existente y modificarlo

Aquí se escriben las notas y/o observaciones necesarias por parte del médico.

Síntoma o patología que a tratar.

Sobre el programa

Puntos básicos que se sugieren tratar


Puntos adicionales que se sugieren tratar

Solo habilitada para algunos síntomas o patologías, nos da una pequeña orientación de cómo realizar el tratamiento

Para ir directo a la pantalla de localización de puntos y visualizar el punto que se ponga en el cuadro de texto.

Para regresar a la pantalla de selección de síntomas y patologías.

Para cerrar el programa.

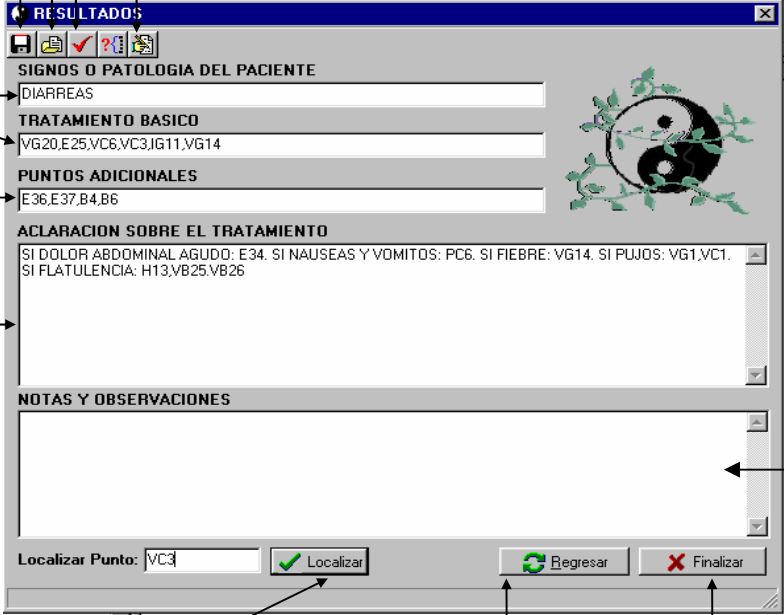

Esta operación puede repetirse todas las veces que desee.


En la pantalla RESULTADOS aparecen dos espacios que son para escribir sobre el enfermo y su patología o síntomas todo lo que desee el especialista antes y después del tratamiento respectivamente, no tienen limitaciones de espacio.

Estas notas van a un fichero que puede ser recuperado e impreso para formar parte de la HC del enfermo.

Pantalla # 4 : Localización y visualización de puntos y su respectivo comentario.

Comentario de cómo ubicar el punto punto.

Para localizar otro punto que se ponga en el cuadro de texto.

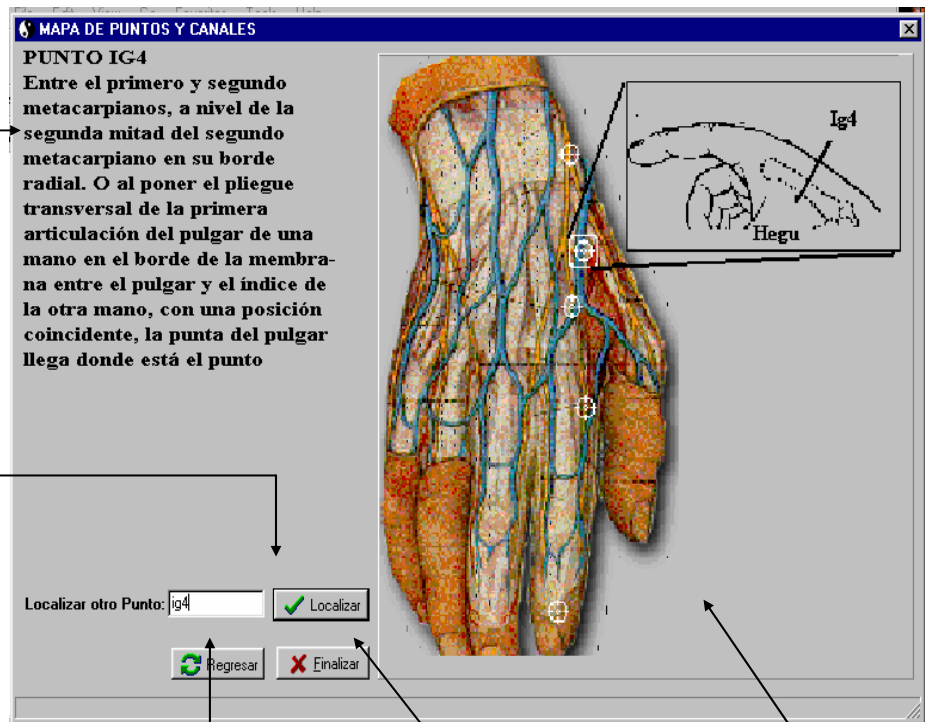

Para regresar a la pantalla de Resultados

Cierra el programa.

Visualización gráfica del punto.

Pantalla # 5: Llenar y guardar la hoja clínica del paciente.

The screenshot displays a software window titled "HOJA CLINICA" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). Below the title bar is a tabbed interface with six tabs: "Datos Generales", "Datos del historia clínica", "Análisis Realizados", "Tratamientos Realizados", "Diagnostico Inicial", and "Reporte". The "Datos Generales" tab is currently selected. The form contains the following fields and controls:

- Código del Paciente:** Text input field.
- Sesión:** Text input field.
- Fecha:** Date picker showing "19/05/03".
- Hora:** Time picker showing "04:45:56 p.m".
- Nombre y Apellidos:** Text input field.
- Sexo:** Dropdown menu.
- Dirección Particular:** Text input field.
- Teléfono:** Text input field.
- No. Identidad:** Text input field.
- Fecha de Nacimiento:** Date picker showing "19/05/03".
- Color de la Piel:** Text input field.
- Peso:** Text input field followed by a unit dropdown menu set to "KGm".
- Altura:** Text input field followed by a unit dropdown menu set to "Metros".
- Ocupación:** Text input field.
- Estado Civil:** Dropdown menu set to "Soltero(a)".
- No. de Hijos:** Text input field.
- Grupo Sanguíneo:** Dropdown menu.
- Fumador ?** Dropdown menu set to "No".
- Alcoholismo ?** Dropdown menu set to "No".
- Asmático ?** Dropdown menu set to "No".
- Hipertenso ?** Dropdown menu set to "No".
- Diabético ?** Dropdown menu set to "No".

At the bottom of the form are two buttons: "Regresar" (with a circular arrow icon) and "Guardar Datos." (with a floppy disk icon).

El programa se distribuye gratuitamente a todas las instalaciones de la Salud Pública de Cuba como una contribución para el desarrollo de las MNT y puede ser adquirido por especialistas extranjeros en ACDAU

Bibliografía

1- Acupuntura Medicina Tradicional Asiática
Editorial Capitán San Luis 1992
Tomas Armando JAlvarez Diaz

2- Cuadernos de Acupuntura
Editorial MASSON, Paris 1988
J. F. Bosarello

3-Compendio de Acupuntura China
Academia de Medicina Tradicional China
Primera Edición 1978

4- Clinical Acupuncture
B. Jain Publishers PVT. LTD, 1987
A. Jayasuriya